



Vivere una nuova
esperienza con Infyna.



Infyna™

Catetere intermittente idrofilico pronto

 Hollister.


Continence Care

Infyna™


Noi vi abbiamo ascoltato e creato Infyna e Infyna Plus per rispondere ai vostri bisogni.

Il catetere intermittente idrofilico pronto Infyna offre un perfetto equilibrio tra flessibilità e stabilità per un manovra confortevole.

Nessuna macchia su comuni tessuti per indumenti come jeans, lino e poliestere¹

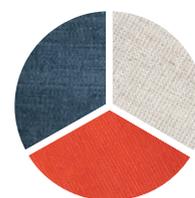

Confezione facile da aprire, anche per le persone con ridotta manualità

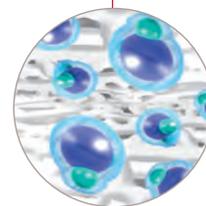

Il vapore acqueo sterile ne garantisce la lubrificazione

Un inserimento e rimozione facilitato

- **Pronto all'uso :**

Grazie alla tecnologia Vaprofilica, il catetere è completamente preidratato e non necessita l'aggiunta d'acqua. Il vapore acqueo sterile contenuto nella confezione attiva il rivestimento del catetere garantendone la lubrificazione. All'apertura della confezione il catetere è pronto all'uso senza liquidi in eccesso.

- **inserimento e manovra facile :**

Un equilibrio perfetto tra flessibilità e stabilità permette di mantenere facilmente il catetere con il suo connettore durante la manovra

- **Manovra atraumatica :**

Gli occhielli del catetere sono lisci ed atraumatici per garantire il massimo confort durante la manovra.



Questo catetere a intermittenza è un dispositivo tubolare flessibile che viene inserito nell'uretra di pazienti sia adulti che pediatrici di sesso femminile allo scopo di drenare l'urina dalla vescica.

- Catetere pronto all'uso per cateterismo ad intermittenza
- Catetere privo di ftalati ricoperto con coating idrofilico
- 2 occhielli atraumatici
- Diametri identificabili con codice colore
- Realizzato senza lattice di gomma naturale

Avvertenze : Per aiutare a ridurre la possibilità di infezioni e/o altre complicanze, non riutilizzare.

L'autocatereterismo deve essere praticato secondo il piano di cure e i consigli dell'operatore sanitario di riferimento. Seguire sempre le istruzioni per l'uso fornite. Poiché la frequenza di cateterizzazione varia da persona a persona, la frequenza raccomandata di cateterizzazione dovrebbe essere fornita da un operatore sanitario di fiducia. Per qualunque domanda relativa alla cateterizzazione la preghiamo di contattare il suo operatore sanitario di fiducia.

Nota : Les boîtes doivent être rangées à plat et à température ambiante.

Questo prodotto è composto da : Connettore in PVC e corpo del catetere privo di ftalati, sacca di raccolta in poliuretano.

Riferimento

1. Dati su file. Analysis of potential loose liquid to stain clothing for Onli and competitor products. Hollister. 2015.

	Misura	Codice articolo	Pharmacodice	Conf.
Infyna™ Catetere intermittente idrofilico pronto all'uso MiGeL / LiMA / EMAp: 15.10.02.01.1L	8 Ch	88081	6975493	25
	10 Ch	88101	6975501	25
	12 Ch	88121	6975518	25
	14 Ch	88141	6975524	25
Infyna Plus™ Catetere intermittente idrofilico pronto all'uso con sacca integrata MiGeL / LiMA / EMAp: 15.10.03.00.1L	8 Ch	86081	6975547	25
	10 Ch	86101	6975530	25
	12 Ch	86121	6975553	25
	14 Ch	86141	6975576	25

Hollister Svizzera

Bernstrasse 388
8953 Dietikon

www.hollister.ch

Consulenza :

Tel : 0800 55 38 39

Ordini:

Tel : 044 730 45 05 • Fax 044 730 54 44

Lunedì a venerdì : 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

E-Mail : info@hollister.ch

Prima di utilizzare uno dei prodotti indicati, leggi per intero le istruzioni d'uso contenute nel foglietto illustrativo fornito con ciascun prodotto, che include le sezioni Uso previsto, Descrizione, Controindicazioni, Avvertenze, Precauzioni d'uso, Eventi avversi e Istruzioni d'uso del dispositivo.

Hollister e logo, Infyna sono marchi registrati da Hollister Incorporated.
©2021 Hollister Incorporated.

I dispositivi medici sterili venduti nell'UE e in Svizzera sono contrassegnati dal seguente simbolo.

CE
0050

 **Hollister**